


1. Charakteristika

- Moderní bezkontaktní teploměr pro okamžitě měření teploty na čele. Vhodné pro měření teploty osob každé věkové skupině, s výjimkou novorozenců.
- Kontraindikace - žádné

2. Popis přístroje

- Teploměr se skládá z krytu, senzoru, displeje a hlavního panelu

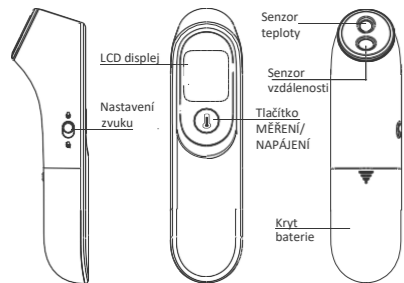

• LCD displej



01

3. Poznámky

POZNÁMKY:

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud teploměr nepoužíváte delší dobu (déle než 3 měsíce), vyjměte baterii, aby nedošlo k její vylití.
- V případě teplotního rozdílu mezi prostředím, ve kterém je teploměr skladován, a teplotou okolní, ve kterém bude teplota měřena, umístěte teploměr v prostředí s pokojovou teplotou na déle než 30 min., aby nedošlo ke zkreslenému měření.
- Teploměr neponořujte do tekutin.
- Nepoužívejte přístroj delší dobu při příliš vysoké nebo nízké teplotě okolí. Neházejte teploměrem ani s ním neklepejte a vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty.
- Nenechávejte baterii v blízkosti ohně, ani jej nevhazujte do ohně, aby nedošlo k explozi baterie.
- Nepoužívejte baterii, pokud došlo k jejímu vylití, nebo se na ní objevila plíseň. Baterii nebo přístroj zlikvidujte v souladu s místními předpisy týkajícími se ochrany životního prostředí.
- Teploměr se skládá z citlivých elektroprvků, které by neměly být vystaveny silnému elektromagnetickému poli.
- Přístroj neopravujte sami, protože takový postup může vést ke zkreslenému měření nebo poruše přístroje.
- Pokud nelze problém vyřešit nebo se objeví chyba, kontaktujte místního distributora.
- Nikdy neprovádějte měření, pokud je přístroj mokrá, protože to může vést ke zkresleným výsledkům.
- Před provedením měření se ujistěte, aby na čele pacienta nebyl pot, kosmetické přípravky a čelo nebylo masné. Ujistěte se, že pacient se nekoupal, necvil ani nejedl během posledních 30 minut před měřením.
- Během měření se vyhněte přímému slunečnímu záření, stůjte dále od klimatizační jednotky nebo ohřívače, jelikož toto může vést ke změně teploty na povrchu čela.

02

- Pokud se přístroj dostane do kontaktu s párou, můžete teploměr používat, až pára vyschne, nebo jej můžete opatrně otřít měkkým, suchým hadříkem, jinak výsledek měření může být zkreslený.
- Uživatel, který si měří teplotu sám, musí ji měřit blízko čela.
- Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a ujistěte se, že se uvnitř nacházejí baterie.
- Přístroj se skládá z baterie a elektroprvků, které lze recyklovat. V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte baterie do komunálního odpadu – odevzdávejte je do místního sběrného dvora.

4. Pracovní podmínky

- Okolní prostředí:

Okolní teplota: 10°C - 40°C
Relativní vlhkost: 15% - 90%RH
Atmosférický tlak: 70kPa - 106kPa

- Doprava a skladování

Okolní teplota: -20°C - +55°C
Relativní vlhkost: 15% - 90%RH

5. Instalace a použití

- Baterie

Před vložením baterií přesuňte kryt baterie směrem dolů a vložte baterie dovnitř. Přístroj ihned spustí automatickou kontrolu. Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy se správnou polaritou, a zasuňte kryt baterie zpět.

- Nastavení jednotky měření
Pokud chcete změnit jednotku měření, vypněte displej, podržte tlačítko měření/napájení po dobu 10 vteřin. Následně krátce stiskněte tlačítko měření/napájení a zvolte jednotku měření teploty „C“ nebo „F“. Zvolenou jednotku potvrdíme delším přidržením tlačítka měření/napájení.

03

- Měření tělesné teploty
- Nasměrujte teploměr na střed čela na vzdálenost 0-5 cm.
- Stiskněte tlačítko měření / napájení. Po cca 1 vteřině teploměr začne vibrovat a vydávat zvukovou signalizaci a zobrazí se výsledky.

- Poznámky:

- ① Pokud je vzdálenost během měření větší než ok. 5 cm, na displeji se objeví „0-5“. Pak je nutno se přiblížit k pacientovi (viz obr. vedle).
- ② Pokud je vzdálenost během měření menší než cca 5 cm, přístroj automaticky provede měření, začne vibrovat a vydá zvuk „di“, a následně zobrazí výsledek měření.
- ③ Pokud teplota bude 37,6 °C nebo vyšší, přístroj vydá třikrát rychlý zvukový signál „di-di-di“.
- ④ Pokud výsledek měření bude mimo měřicí rozmezí přístroje 32 °C ~ 43 °C přístroj vydá třikrát rychlý, zvuk „di-di-di“. Je nutno zopakovat měření podle správného postupu a za vhodných podmínek.



- Zapnutí/vypnutí zvuku
- Pokud chcete vypnout zvuk, přesuňte boční tlačítko směrem k symbolu
- Pokud chcete zapnout zvuk, přesuňte boční tlačítko směrem k symbolu

- Vypnutí napájení

1. Pokud chcete přístroj vypnout, stiskněte tlačítko měření/napájení od 3 do 5 vteřin.
2. Pokud přístroj nebude provádět žádné operace, automaticky se vypne po cca 30 vteřinách.

04

6. Poruchy a jejich řešení

Problém	Možná příčina	Odstranění poruchy
Displej zobrazuje "Lo"	Výsledek měření je nižší než 32 °C, tj. je mimo měřicí rozmezí	Znovu proveďte měření, postupujte podle návodu k použití
Displej zobrazuje "Hi"	Výsledek měření je vyšší než 43 °C, tj. je mimo měřicí rozmezí	Znovu proveďte měření, postupujte podle návodu k použití
Displej zobrazuje "Er"	Okolní teplota je příliš vysoká nebo příliš nízká	Měření je nutno provádět v teplotě okolního prostředí v rozmezí od 10 °C do 40 °C
Displej zobrazuje "□"	Baterie je téměř vybitá	Vyměňte baterii
Displej nic nezobrazuje nebo se zobrazuje chyby	Baterie jsou vloženy obráceně, s otočenými póly, nebo přístroj nefunguje správně	Vložte opět baterie nebo se obraťte na distributora

05


7. Bezpečnostní symboly a jejich význam

Symbol	Význam
	Ochrana typu B
	Varování a upozornění
	Recyklace polypropylenu
	Výrobce
	Autorizovaný zástupce
	Postupujte podle návodu k použití
	Symbol pro označení elektrických a elektronických zařízení v souladu se směrnicí 2002/96/ES
	Období bezpečnosti a ochrany životního prostředí po dobu 10 let
IP22	Ochrana proti pevným cizím tělesům s průměrem větším než 12 mm. Ochrana proti svisle padajícím vodním kapkám při naklonění krytu o úhel až 15° od svislice v každém směru, kapající voda nemá škodlivý vliv
	Rozsah teplot
	Rozsah vlhkosti
	Rozsah atmosférického tlaku
	Touto stranou nahoru
	Křehké zboží
	Chraňte před vlhkostí
	Zdravotnický prostředek splňuje požadavky směrnice MDD 93/42/EHS
	Přečtěte si návod k použití
	Datum výroby

a

06

8. Technické parametry

- Napájení: 2 baterie AAA (2 x 1,5V)
- Měřicí rozmezí: 32.0°C~43.0°C
- Rozlišení displeje: 0.1°C
- Přesnost měření:
±0.2°C v rozmezí 35.0°C~42.0°C
±0.3°C v rozmezí 32.0°C~34.9°C i 42.1°C~43.0°C
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem: přístroj je napájen z vnitřního napájecího zdroje
- Ochrana typu BF 
- Provozní režim: nepřetržitý provoz
- Měřicí jednotky °C/°F
- Místo měření: čelo
- Čas mezi jednotlivými měřeními ≤1s
- Délka měření: ≤1s
- Stupeň ochrany proti pronikání vlhkosti: IP22
- Klasifikace bezpečnosti: přístroj nelze používat v přítomnosti hořlavých anestetických plynů smíchaných se vzduchem nebo kyslíkem nebo oxidem dusným
- Rozměry: 149×38×42 mm
- Hmotnost: 68g (bez baterií)


9. Teplotní rozdily

Každý uživatel může mít jinou tělesnou teplotu, a individuální tělesná teplota se mění v závislosti na době měření.

Pravidelná tělesná teplota u většiny lidí je uvedena pro informační účely:

Teplota v podpaží:
36,0 °C ~ 37,4 °C
Teplota v ústech:
36,3 °C ~ 37,2 °C
Teplota v konečnicku:
36,9 °C ~ 37,9 °C

10. Výměna baterií

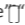- Objeví-li se na displeji symbol slabé baterie  vyměňte vybité baterie za nové (2 ks baterie AAA). Otevřete zadní kryt a vyjměte použité baterie. Vložte nové baterie v souladu s označením pólu.
- Nepoužíváte-li teploměr delší dobu, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vylití.
- Použité baterie likvidujte v souladu s příslušnými předpisy.

11. Záruka

Na všechny produkty, které distribuuje naše firma, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listu, který jste obdrželi v okamžiku koupě přístroje.

Současně bychom chtěli zdůraznit, že pro uplatnění záruky je nutné předložit doklad o nákupu (pokladní doklad nebo fakturu).


Jako firma přivítává uživatelům poskytujeme pouze testované produkty, pokud jde o použitý materiál, kvalitu a funkčnost. Máte-li jakékoli dotazy týkající servisního postupu, obraťte se na naši firmu.

12. Údržba

- Teploměr je nutno čistit a dezinfikovat po každém použití.
- Aby výsledek měření byl správný, je nutné kontrolovat, zda jsou senzory čisté:
o Senzor čistěte jemně pomocí čistého, měkkého hadříku nebo vatovým tampónem. Neutírejte senzor jiným materiálem, protože může dojít k poškození povrchu čočky senzoru nebo poruše přístroje.
- Dezinfekce přístroje a jeho hlavy:
o Povrch přístroje a hlavu, kterou se provádělo měření, jemně otřete vatovým tampónem namočeným v lékárenském alkoholu (70%). Teploměr lze opět použít až po úplném odpaření alkoholu.
- Bezpečnostní opatření během skladování:
o Teploměr skladujte v suché a nezaprášené místnosti.
o Vyhněte se přímému slunečnímu světlu.
o Neskladujte teploměr v přehřátých, vlhkých a zaprášených místnostech, a se nachází žíravé plyny.
o Tento produkt je velmi precizní přístroj, a proto jej nesmíte upustit. Během přepravy je nutno zabránit otřesům a jiným nepříznivým účinkům. Pokud je senzor nebo samotný přístroj poškozený, teploměr okamžitě přestaňte používat.
o Tento přístroj není vhodný k použití pro jakékoliv jiné účely, než ke kterým je určen.
o Během použití teploměru u dětí je nutno dodržovat běžná bezpečnostní opatření.
Doporučujeme provádět kalibraci displeje (alespoň jednou za rok).

POZNÁMKY:

yuwell

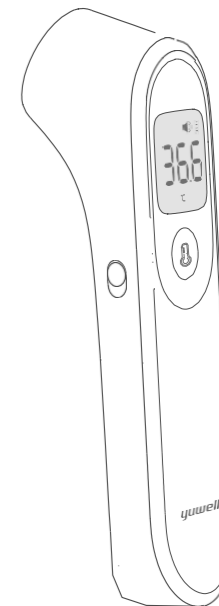


YT-1 Bezdotykový teploměr

Návod k použití

Před použitím produktu si pozorně přečtěte tento návod.

 JiangSu YuYue
Medical Equipment & Supply Co., Ltd.
Yunyang Industrial Park, Danyang,
Jiangsu Province, China, 212300

 Shanghai Int. Holding Corp. GmbH
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany


0123

Wersja:1_03-03.2020 1730207-0A 